

V-Drive

Elektrische Schiebehilfe für
Ihren manuellen Rollstuhl



Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Daten V-Drive

Sitzbreite	max. Geschwindigkeit km/h	max. Steigung	Reichweite km	Antrieb	Batterie	Gewicht kg	max. Belastung kg
390 - 480	6 km/h	8°	ca. 15 km	150 W	2x12V/ 12Ah	11,8 kg (ohne batterie)	135 kg*
500 - 600 (H.D. version)				200 W (H.D. version)	2x12V/12Ah (H.D. version)	8,2 kg (batteriepack)	200 kg* (H.D. version)

Abweichungen bei Maßen, Gewichten und Winkel (15mm / 1,5kg / 1,5°) sind möglich. * inkl. Rollstuhl

Komfort

Die Schiebehilfe V-Drive erweitert den Bewegungsradius Ihres manuellen Rollstuhls. Sie unterstützt eine Begleitperson beim Schieben des Rollstuhls. Zur Überwindung von Steigungen oder einfach für einen Spaziergang im Freien... all das ist ideal für den Einsatz des V-Drive. Die bedienerfreundliche Steuerung des V-Drive sichert den täglichen und komfortablen Einsatz Ihres Rollstuhls.




Wir bieten zwei Versionen der Schiebehilfe V-Drive an: Standardversion (für eine max. Belastung bis 135 kg inkl. Rollstuhl); Schwergewichtversion (für eine max. Belastung bis 200 kg inkl. Rollstuhl).

Montage

Die Bedieneinheit lässt sich ohne Werkzeug einfach links oder rechts am Schiebegriff befestigen. Für den Transport (z.B. in einem PKW) lässt sich der V-Drive ohne großen Aufwand vom Rollstuhl trennen. Entnehmen Sie den separaten Batteriepack, trennen Sie die Antriebseinheit vom Rollstuhl – fertig!

Wollen Sie den V-Drive einmal nicht nutzen, lässt sich die Antriebseinheit einfach vom Boden abheben und an einem der Schiebegriffe aufhängen: Ihr Rollstuhl lässt sich wieder manuell steuern.

Die **NEUE** Höhenverstellung kann der Motor horizontal positioniert werden.

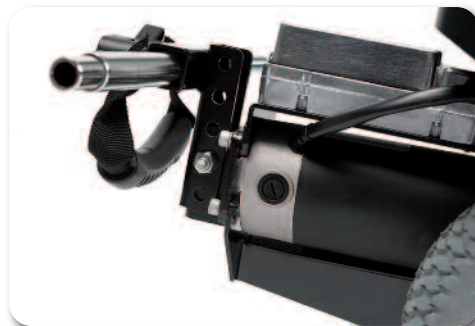

Vermeiren Deutschland GmbH

Wahlerstraße 12 a
D-40472 Düsseldorf
Deutschland
Tel.: +49 (0) 211 94 27 90
Fax: +49 (0) 211 65 36 00
Mail: info@vermeiren.de
Site: www.vermeiren.de

Vermeiren Schweiz S.A.

Eisenbahnstrasse 62
3645 Gwatt (Thun)
Schweiz
Tel.: +41 (0) 33 335 14 75
Fax: +41 (0) 33 335 14 67
Mail: info@vermeiren.ch
Site: www.vermeiren.ch

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.

Vermeiren Austria GmbH

Schärdinger Straße 4 - 4061 Pasching - Österreich
Tel.: +43 (0) 7229/64900 - Fax: +43 (0) 7229/64900-909
Mail: info@vermeiren.at - Site: www.vermeiren.at



VERMEIREN
Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Technische Änderungen vorbehalten.